



OXYGEN & NEBULIZATION

Beragam jenis alat bantu pernapasan untuk terapi oksigen dan nebulisasi

PRODUK AKL

Hospitech® Nasal Cannula 01
Hospitech® Oxygen Mask 02
Hospitech® Oxygen Tubing 03
Hospitech® Oxygen Mask with Reservoir Bag (Non-Rebreathing) 04
Hospitech® Oxygen Mask with Reservoir Bag (Rebreathing) 05
Hospitech® Disposable Nebulizer Set with Oxygen Mask and 82-Inch Tubing 06

PRODUK AKD

UNICORN Nasal Oxygen Cannula 07
UNICORN Oxygen Mask 08
UNICORN Non-Rebreathing Oxygen Mask 09
UNICORN Nebulizer Mask 10



HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

Nasal Cannula



Metode
dipping prong



Selang star
lumen



AKL 10403700370

SPEKIFIKASI

- Desain “kembang” (star lumen) di dalam tubing.
- Selang bebas tekukan (*kinking*) sehingga mencegah terhambatnya aliran oksigen.
- Mendukung pergerakan pasien.
- Nose tip yang lembut dan disesuaikan dengan lubang hidung melalui metode pencetakan *dipping prong*

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
ADULT	50	Non-sterile	HOS-011
CHILD	50	Non-sterile	HOS-012
PAEDIATRIC	50	Non-sterile	HOS-013
NEONATE	50	Non-sterile	HOS-014



HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

Oxygen Mask



Selang star lumen



AKL 10403700369

SPEKIFIKASI

- Tali elastis yang dapat disesuaikan dan klip hidung terintegrasi untuk posisi masker yang tepat di area mulut dan hidung
- Selang star lumen sepanjang 2 meter untuk memastikan aliran kontinu
- Konektor berbentuk corong di ujung proksimal untuk memfasilitasi koneksi yang sederhana dan cepat dengan tabung oksigen

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
ADULT	20	Non-sterile	HOS-016
CHILD	25	Non-sterile	HOS-017



HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

Oxygen Tubing



Selang star lumen



AKL 10403700368

SPEKIFIKASI

- Untuk menyuplai oksigen ke pasien yang terhubung ke masker oksigen.
- Panjang 82 inci dengan kedua konektor ujung yang fleksibel.
- Selang star lumen yang tahan tekukan

PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
50	Non-sterile	HOS-079



HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

Oxygen Mask with Reservoir Bag (Non-Rebreathing)



Selang star lumen



AKL 10403906261

SPEKIFIKASI

- Mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 80-100% dan laju aliran 10-12 liter/menit.
- Dilengkapi 2 katup sehingga udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi.
- Tali elastis, terintegrasi, dan disesuaikan klip hidung untuk memastikan posisi yang tepat.
- Selang bebas tekukan sehingga aliran oksigen lebih lancar.

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
ADULT	50	Non-sterile	HOS-020
PAEDIATRIC	50	Non-sterile	HOS-021



HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

Oxygen Mask with Reservoir Bag (Rebreathing)



AKL 10403906262

SPEKIFIKASI

- Mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 60-80% dan laju aliran 10-12 liter/menit.
- Tali elastis, terintegrasi, dan disesuaikan klip hidung untuk memastikan posisi yang tepat.
- Selang bebas tekukan sehingga aliran oksigen lebih lancar.

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
ADULT	50	Non-sterile	HOS-022
PAEDIATRIC	50	Non-sterile	HOS-023



HOSPITECH™

HEALTHCARE FOR HUMANITY

Disposable Nebulizer Set with Oxygen Mask & 82-Inch Tubing



AKL 20403700365



Wadah penampung obat



Selang star lumen


SPEKIFIKASI

- Chamber dengan volume 6 mL yang dapat diisi dengan obat yang akan diencerkan dan berdifusi dengan oksigen dan dihirup oleh pasien.
- Tersedia dengan selang oksigen berukuran 82 inci berjenis star lumen yang tahan tekukan.

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
ADULT	50	Non-sterile	HOS-018
CHILD	50	Non-sterile	HOS-019



Nasal Oxygen Cannula

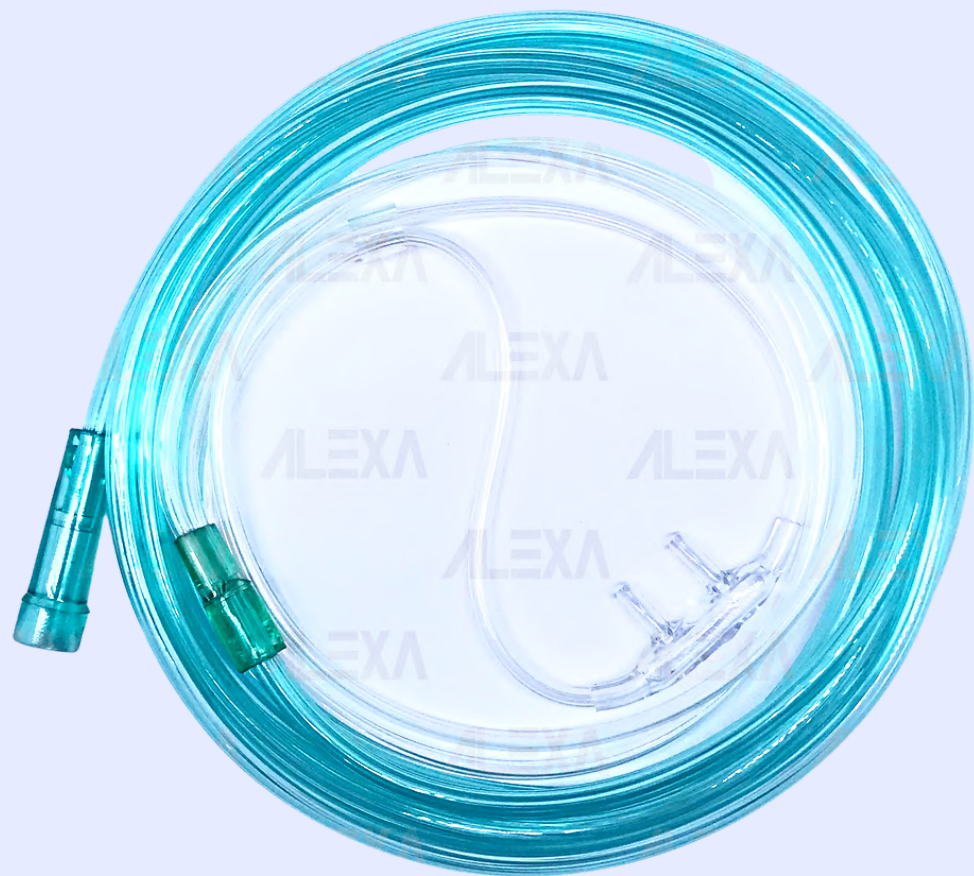

UNICORN
Nasal Oxygen Cannula

Direction For Use :
 1. Attach the oxygen supply tubing to the gas source and set the oxygen to the prescribed flow.
 2. Check for gas flow throughout the device.
 3. Insert the nasal tips into the nostrils with the two plastic tubes over the ears and under the chin.
 4. Gently adjust the plastic slide until the cannula is secure.

Caution :
 * For single use. Discard after use.
 * Do not use if package is opened or damaged.
 * Do not store at extreme temperature and humidity. Store in cool and dry place.
 * Ensure that all connections are secure and air circulates freely through the tubing.

Adult
 Child
 Infant
 Neonate

MFG :
 EXP : MAR 2022
 MAR 2027
 LOT : 21220323

KEMENKES RI AKD 10403122426
 Produced By : PT. Ocean Medika Indonesia
 Tangerang, Banten - Indonesia
 15214
 Distributed By : PT. Alexa Medika
 Medan - Indonesia

AKD 10403122426

SPEKIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Tubing Star Lumen	Mengalirkan oksigen dari tabung oksigen	PVC
Tubing Nasal Tip	Mengalirkan oksigen dari tabung star lumen ke nasal tip, panjang 2.5 m	PVC
Joint Tube	Untuk mengatur panjang tubing nasal tip sesuai dengan kenyamanan pasien	PVC
Connector Oxygen	Penghubung dari tabung oksigen ke tubing star lumen	PVC
Triple Connector Oxygen	Penghubung antara tubing star lumen dengan tubing nasal tip	PVC
Nasal Tip	Untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung	PVC

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
ADULT	100	Non-sterile	UNICORN-033
CHILD	100	Non-sterile	UNICORN-034
INFANT	100	Non-sterile	UNICORN-035
NEONATE	100	Non-sterile	UNICORN-036



Oxygen Mask



AKD 10403122400


SPEKIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Masker	Menutup mulut dan hidung saat penyaluran oksigen	PVC
Kawat Hidung	Menyesuaikan posisi masker dengan hidung	Aluminium
Connector Masker	Penghubung antara masker dengan tubing	PVC
Tubing	Penyalur oksigen ke hidung	PVC
Connector Oxygen	Penghubung antara masker dengan tabung oksigen	PVC
Tali Pengikat	Pengait masker ke telinga	Spandex

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
DEWASA	100	Non-sterile	UNICORN-043
ANAK	100	Non-sterile	UNICORN-044
BAYI	100	Non-sterile	UNICORN-045



Non-Rebreathing Oxygen Mask

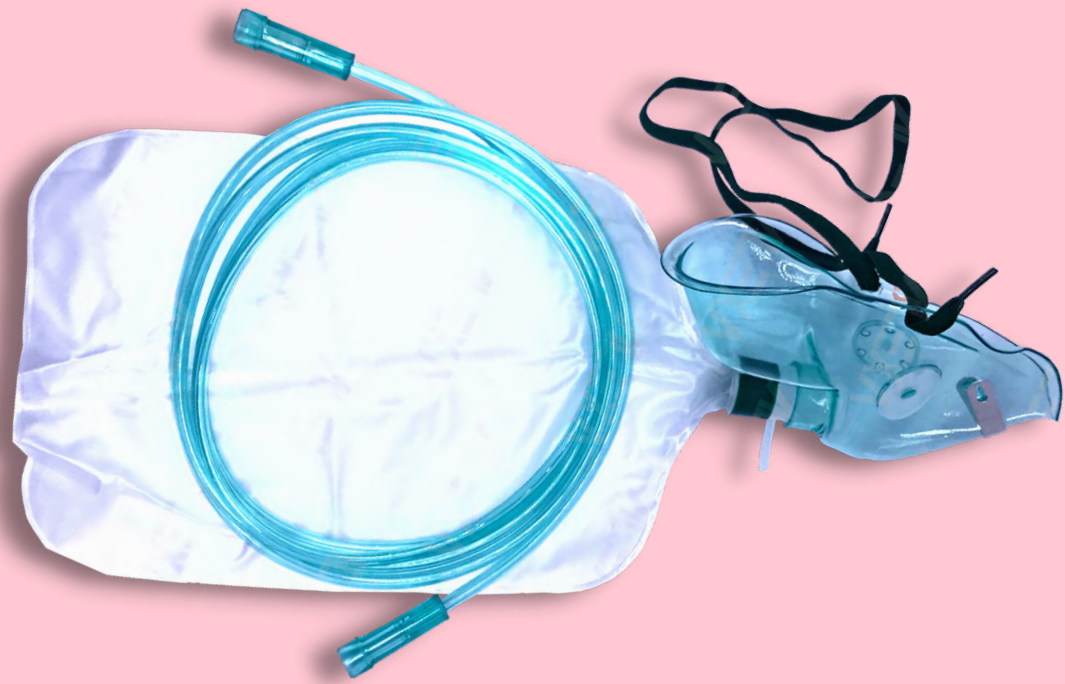

AKD 10403122375

SPEKIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Masker	Menutupi mulut dan hidung saat penyaluran oksigen	PVC
Nose Clip	Menyesuaikan posisi masker dengan hidung	Aluminium
Konektor Masker	Penghubung masker dengan tubing	PVC
Tubing	Penyalur oksigen ke hidung	PVC
Konektor Oksigen	Penghubung masker dengan gas oksigen	PVC
Pengikat	Pengait masker ke telinga	Spandex
Reservoir Bag	Sebagai penampung oksigen	PVC
Valve	Mencegah karbon dioksida terhirup kembali	Silikon

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
DEWASA	100	Non-sterile	UNICORN-040
ANAK	100	Non-sterile	UNICORN-041
BAYI	100	Non-sterile	UNICORN-042



Nebulizer Mask



AKD 20403122638

SPEKIFIKASI

Komponen	Fungsi	Material
Nebulizer Mask	Menutup mulut dan hidung saat penyaluran oksigen/terapi	PVC
Kawat Hidung	Menyesuaikan posisi masker dengan hidung	Aluminium
Konektor Masker	Penghubung antara masker dengan tubing	PVC
Tubing	Penyalur oksigen/obat ke hidung	PVC
Oxygen Connector	Menghubungkan masker dengan gas oksigen	PVC
Pengikat	Pengait masker ke telinga	Spandex
Nebulizer	Penampung obat untuk terapi	PVC

UKURAN	PCS/CTN	KESTERILAN	PREORDER
DEWASA	100	Non-sterile	UNICORN-037
ANAK	100	Non-sterile	UNICORN-038
BAYI	100	Non-sterile	UNICORN-039

ALEXA

Adaptasi untuk Melayani

Medan

Telp. (061)4525-288

Bali

Telp. (0361)257-637

Kediri

Telp. (0354)6027-789

Pekanbaru

Telp. 0851-0030-3775

Makassar

Telp. (0411)4742-003

Banjarmasin

Telp. 0813-4947-9789

Mataram

Telp. (0370)6162-560

Palembang


Telp. (0711)5617-675

Banda Aceh

Telp. (0651)6302-247

Balikpapan

Telp. (0542)8514-690

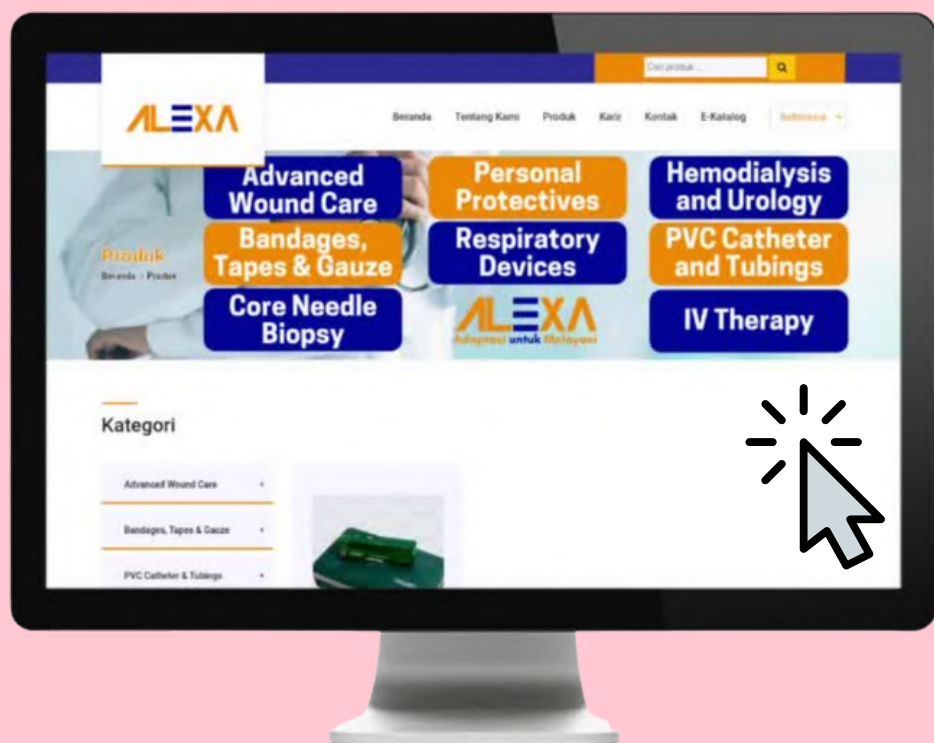

*e*catalogue
e-katalog.lkpp.go.id

 **Alexa Medika**

 **pt.alexamedika**

Untuk info lebih lanjut, kunjungi
situs www.alexamedika.com

